




CARDIOVIT AT-2 plus

ZWEI GERÄTE IN EINEM!

EKG und Spirometrie in einem Gerät:

Noch bis vor Kurzem wurde die Wichtigkeit der Spirometrie für die frühzeitige Diagnose von chronischen obstruktiven Lungenerkrankungen und von gewissen Herzerkrankungen massiv unterschätzt. Die steigende Zahl der Patienten, die an Einschränkungen der Lungenfunktion leiden, zeigt jedoch deutlich, wie wichtig eine regelmässige Untersuchung der Funktion der Lungen ist.

SCHILLER hat als erster Hersteller die beiden am häufigsten verwendeten Lungenfunktions- und Herztests in einem Gerät vereint – dem CARDIOVIT AT-2 plus mit EKG und Spirometrie in einem.

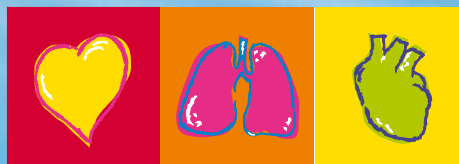

SCHILLER

The Art of Diagnostics

CARDIOVIT AT-2 plus

ZWEI GERÄTE IN EINEM!

Einfache Handhabung – doppelter Nutzen:



- Zwei Tests in einem Gerät machen sich doppelt bezahlt
- Die beiden Funktionen werden vom selben Gerät aus gesteuert
- Durch sein geringes Gewicht und die handliche Grösse ist der CARDIOVIT AT-2 plus einfach zu transportieren
- Das Gerät zeichnet sich durch seine absolute Zuverlässigkeit aus
- Der integrierte Hochgeschwindigkeitsdrucker liefert Ihnen Berichte im A4-Format in unerreichter Qualität und ablagefertig
- In weniger als 20 Sekunden erhalten Sie Ausdrücke inklusive Diagnose und Messwerte
- Integrierter Akku
- Vergrösserte Ausdrücke und eine unlimitierte Anzahl Kopien
- Die alphanumerische, wasserfeste Tastatur mit Funktionstasten ermöglicht die einfache und rasche Eingabe von Patientendaten
- Datenspeicherung von mehr als 60 Aufnahmen möglich (Option)
- Daten können auf den PC übertragen werden



Weltweit anerkannte EKG-Technologie:


- 6-Kanal Echtzeit-Ausdruck bei 5, 25 oder 50 mm/s
- Automatischer 6-/12-Kanal-Ausdruck auf einer oder zwei Seiten
- Schnelles und zuverlässiges computergestütztes Interpretations- und Vermessungsprogramm für Erwachsenen- und Kinder-EKGs
- Keine Wiederholungen der EKGs mehr nötig, da die Qualität der Kurven durch die SCHILLER Glättungs- und Basislinienfilter optimiert wird
- Dank der einfachen Kontrolle aller 12-Ableitungen auf dem integrierten 3-Kanal-Bildschirm sparen Sie Zeit und Papier



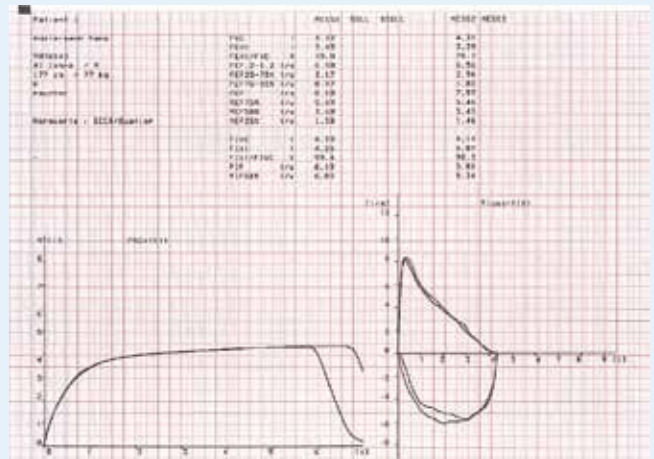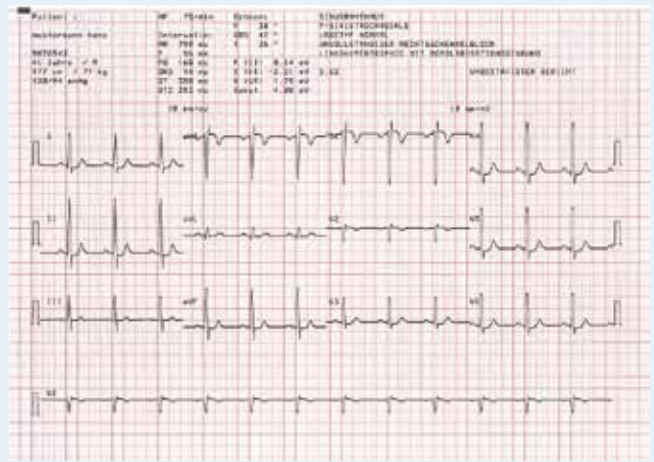

Höchste Spirometrie-Standards:

- Mit dem einzigartigen Einweg-Mundstück des SP-250 Sensors wird die Gefahr einer Kreuzkontamination ausgeschlossen
- Kleiner und leichter Sensor
- Einfache und schnelle Kalibrierung
- Inspiratorische und expiratorische Lungenfunktionstests: FVC, SVC, MV, MVV sowie Prä- / Postmedikationstests
- Sollwert-Tabellen sind gespeichert und können je nach Bedarf ausgewählt werden
- Visuelle Unterstützung dank der Echtzeit-Grafik und der Darstellung der Messwerte auf dem Bildschirm

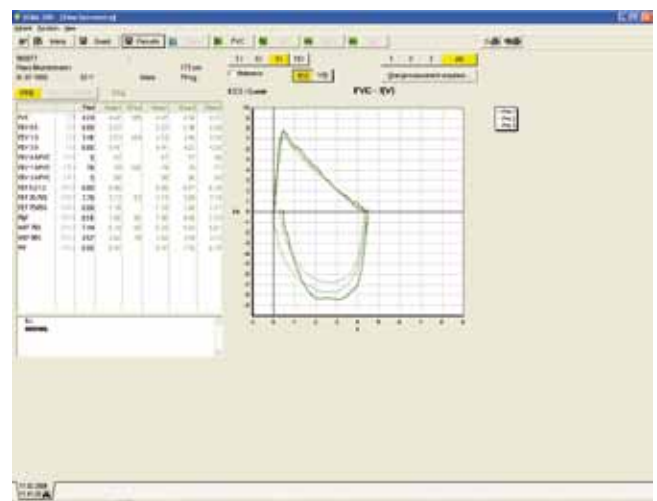



Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
52200 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone +603 6272 3033
Fax +603 6272 2030
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
A-4040 Linz
Phone +43 732 709 90
Fax +43 732 757 000
sales@schiller.at
www.schiller.at



China
Alfred Schiller Medical Equipment Co. Ltd.
100015 Beijing, China
Phone +86-010-52007020
diamond@schillermedical.com
www.schiller.cn



France
SCHILLER Médical S.A.S.
F-67162 Wissembourg/Cedex
Phone +33 3 88 63 36 00
Fax +33 3 88 94 12 82
info@schiller.fr
www.schiller-medical.com



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
F-77600 Bussy St Georges
Phone +33 1 64 66 50 00
Fax +33 1 64 66 50 10
infoschiller@schiller-france.fr
www.schiller-france.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
D-85622 Feldkirchen b. München
Phone +49 89 62 99 81-0
Fax +49 89 62 99 81-54
info@schillermed.de
www.schillermed.de



Hungary
SCHILLER Diamed Ltd.
H-1141 Budapest
Phone +36 (1) 383-4780 / 460-9491
Fax +36 (1) 383-4778
sales@schiller.at
www.schiller-hungary.hu



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
Mumbai - 400 001, India
Phone +91 22 6152 3333/ 2920 9141
Fax +91 22 2920 9142
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com



Japan
SCHILLER Japan, Ltd.
Hiroshima 734-8551
Phone +81 82 250 2055
Fax +81 82 253 1713
koji.maekawa@schiller.jp
www.schiller.jp



Croatia
Schiller medicinski instrumenti d.o.o.
10000 Zagreb
Phone +385 1 309 66 59
Fax +385 1 309 66 60
info@schillerzg.hr
www.schiller.ch



Latin America
SCHILLER Latin America, Inc.
Doral, Florida 33172
Phone +1 954 673 0358
Fax +1 786 845 06 02
info@schillerla.ch
www.schillerla.ch



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
PL-02-729 Warszawa
Phone +48 22 8432089
Fax +48 22 8432089
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl



Russia & C.I.S.
SCHILLER AG Rep. office
125124 Moscow, Russia
Phone +7 (495) 970 11 33
Fax +7 (495) 970 11 33
mail@schiller-ag.com
www.schiller-cis.com



Serbia
SCHILLER d.o.o.
11010 Beograd
Phone +381 11 39 79 508
Fax +381 11 39 79 518
info@schiller.rs
www.schiller.rs



Slovenia
SCHILLER d.o.o.
2310 Slovenska Bistrica
Phone +386 2 843 00 56
Fax +386 2 843 00 57
info@schiller.si
www.schiller.si



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
E-28230-Las Rozas/Madrid
Phone +34 91 713 01 76
Fax +34 91 355 79 33
schiller@schiller.es
www.schiller.es



Switzerland
SCHILLER-Reomed AG
CH-8953 Dietikon
Phone +41 44 744 30 00
Fax +41 44 740 37 10
sales@schiller-reomed.ch
www.schiller-reomed.ch



Turkey
SCHILLER TÜRKİYE
Okmeydani-Sisli - Istanbul
Phone +90 212 210 8681 (pbx)
Fax +90 212 210 8684
sales@schiller-turkiye.com
www.schiller-turkiye.com



USA
SCHILLER America Inc.
Doral, Florida 33172
Phone +1 786 845 0620
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramerica.com
www.schilleramerica.com



SCHILLER

The Art of Diagnostics